

ONE TOUCH® UltraSoft

Lancets/Kim lấy máu



AW 07294701A

OneTouch® UltraSoft Lancets are for use with all OneTouch® Penlet® and OneTouch® UltraSoft brand automatic blood samplers from LifeScan, and most other blood sampling devices.

Intended use


The OneTouch® UltraSoft lancets are sterile, single use devices that have been designed for single patient use in a general environment. Their intended use is for performing skin punctures on adults, children and neonates for the express purpose of obtaining blood samples for a variety of reasons e.g. diabetic blood glucose monitoring.

However, frequency of use and intended patient population is dependent on the treatment regime.


The OneTouch® UltraSoft lancet is compatible with the single patient use OneTouch® UltraSoft and OneTouch® lancing devices.

Instructions for Use


The end user loads the lancet into the lancing device.

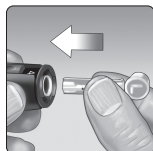


Twist off the moulded cap to expose the sterile needle immediately prior to use. Save the cap for later use.

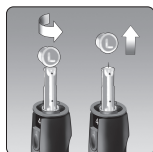

After preparing the test site, the subject will follow the lancing device instructions for use to perform a lancing event on the appropriate finger.

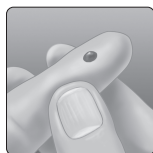

The used lancet should be capped with the moulded cap and disposed of in accordance with local requirements

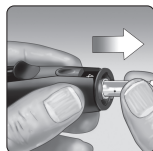

Disposing of the used lancet

It is important to discard the used lancet carefully after each use to avoid unintended lancet stick injuries.

Contraindications

The OneTouch® UltraSoft lancets are not indicated to perform Alternate Site Testing (AST) and should not be used to test on the forearm or palm.

Warnings and precautions

- For single use only.
- For your safety, never share the lancet.
- Use the convenient snap-on cap for safe disposal.

- **Do not** use if protective disk has been damaged or removed.
- **Do not** purchase if seal at either end is broken or missing.

Packaging size

Box of 25 lancets.

Box of 100 lancets.

Storage

Store between 5°C–30°C.

Shelf life

5 years from the manufacturing date.

OUR COMMITMENT TO YOU:

Our goal is to provide you with quality healthcare products and dedicated customer service. If you are not really satisfied with this product or if you have questions about the use of any LifeScan product, contact OneTouch® Customer Service at:

In Vietnam:

Freephone: 1800 599 915.

Working Hours: 8:30-17:30.

Description of symbols

For a complete description of all symbols used, please refer to the User's Guide that came with your system.



Consult Instructions for Use



Manufacturer



Storage Temperature Limits



Not for general waste



Do Not Re-use



Sterilised by irradiation



Use By Date



Lot Number

Kim lấy máu OneTouch® UltraSoft được dùng với tất cả các bút lấy máu tự động của nhãn hiệu OneTouch® Penlet® và OneTouch® UltraSoft từ LifeScan, cùng hầu hết các thiết bị lấy mẫu máu khác.

Mục đích sử dụng


Các kim lấy máu OneTouch® UltraSoft là thiết bị đã tiệt trùng và dùng một lần, được thiết kế cho một bệnh nhân sử dụng trong điều kiện thông thường. Mục đích sử dụng là để tiến hành chích lấy máu qua da ở người trưởng thành, trẻ em và trẻ sơ sinh, với mục đích rõ ràng là để lấy mẫu máu cho nhiều lý do khác nhau, ví dụ như theo dõi đường huyết ở người bị đái tháo đường.

Tuy nhiên, tần suất sử dụng và nhóm bệnh nhân dự kiến còn phụ thuộc vào phác đồ điều trị.


Kim lấy máu OneTouch® UltraSoft tương thích với các bút lấy máu OneTouch® UltraSoft và OneTouch® dùng một lần trên bệnh nhân.

Hướng dẫn sử dụng


Người dùng gắn kim lấy máu vào bút lấy máu.

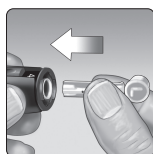


Vặn nắp ra để lộ kim tiệt trùng ngay trước khi sử dụng. Cất nắp đi để dùng sau.

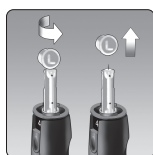

Sau khi chuẩn bị vị trí chích lấy máu, người dùng sẽ làm theo hướng dẫn sử dụng của bút lấy máu để tiến hành chích lấy máu trên ngón tay phù hợp.

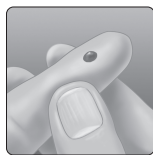

Cần phải đóng lại nắp cho kim lấy máu đã sử dụng và thải bỏ theo yêu cầu ở địa phương.

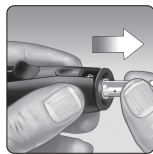

Thải bỏ kim lấy máu đã sử dụng

Điều quan trọng là phải thải bỏ kim lấy máu đã sử dụng một cách cẩn thận sau mỗi lần dùng để tránh thương tật ngoại ý do bị kim lấy máu đâm phải.

Chống chỉ định

Kim lấy máu OneTouch® UltraSoft không được chỉ định để thực hiện chích lấy máu ở vị trí thay thế (AST) và không nên sử dụng để chích lấy máu trên cánh tay hoặc lòng bàn tay.

Cảnh báo và thận trọng

- Chỉ dùng một lần.
- Để đảm bảo an toàn cho bản thân, không bao giờ dùng chung kim lấy máu.
- Sử dụng nắp chụp tiện lợi để thải bỏ an toàn.
- Không** sử dụng nếu đĩa bảo vệ đã bị hỏng hoặc gỡ bỏ.
- Không** mua nếu dấu niêm phong ở một trong hai đầu bị hỏng hoặc mất.

Kích cỡ đóng gói

Hộp 25 kim lấy máu.
Hộp 100 kim lấy máu.

Bảo quản

Bảo quản từ 5 °C–30 °C.

Hạn dùng

5 năm kể từ ngày sản xuất.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỚI QUÝ VỊ:

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho quý vị những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng và dịch vụ khách hàng tận tâm. Nếu quý vị chưa thực sự hài lòng với sản phẩm này hoặc nếu quý vị có thắc mắc về việc sử dụng bất kỳ sản phẩm LifeScan nào, hãy liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng OneTouch®.

Tại Việt Nam:

Điện thoại miễn phí: 1800 599 915.

Giờ làm việc: 8:30-17:30.

Mô tả các biểu tượng

Để biết mô tả đầy đủ về tất cả biểu tượng được sử dụng, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy đo của quý vị.



Tham khảo hướng dẫn sử dụng



Nhà sản xuất



Giới hạn nhiệt độ bảo quản



Không dành cho chất thải thông thường



Không tái sử dụng



Tiệt trùng bằng chiếu xạ



Thời hạn sử dụng



Số lô

Product license holder/Chủ sở hữu số lưu hành:

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Số 23 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp

Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa,

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam



Manufacturer/Nhà sản xuất:

Asahi Polyslider Company, Limited

860-2 Misaki, Maniwa-shi

Okayama, 719-3226, Japan (Nhật Bản)

Product owner/Chủ sở hữu sản phẩm:

LifeScan Europe GmbH

Gubelstrasse 34, 6300 Zug, Switzerland (Thụy Sĩ)

© 2018–2022 LifeScan IP Holdings, LLC

Rev. Date:/Ngày sửa đổi: 05/2022

AW 07294701A



Lifescan